

Alecto® ACP-80



Elektronisch pillendoosje met alarm.

Introductie:

In het Alecto ACP-80 pillendoosje kunt u voor 5 dagelijkse momenten medicijnen opbergen. Tot 5 tijdstippen kunt u dan inprogrammeren waarop een alarmsignaal klinkt en het display aangeeft welke medicijnen u moet innemen.

Het programma wordt dagelijks herhaald totdat u andere tijdstippen instelt.

De ACP-80 pillenvakjes zijn alleen geschikt voor droge medicijnen (pillen, capsules en dergelijke), niet voor drankjes of zalfjes.

Voeding:

De ACP-80 wordt gevoed door 2 batterijen:

Een CR2025 Lithium knoopcelbatterij voor het klokje en de timerfunctie. Deze batterij is door de fabriek alvast geplaatst maar door een isolatiestrip-je nog niet in gebruik genomen.


Daarnaast een 1,5V batterij (formaat AAA) voor het geluid- en trilalarm en voor de displayverlichting. Deze batterij is niet meegeleverd. Gebruik hiervoor een Alkaline batterij, geen oplaadbare.

Bij eerste gebruik:

1. gebruik de schuifschakelaar  om de ACP-80 te openen
2. verwijder de batterijdeksel
3. activeer de knoopcelbatterij door het isolatieplaatje uit de ACP-80 te trekken
4. plaats een 1,5V alkaline batterij, let op de polariteit (+ en -)

Vervangen knoopcelbatterij:

1. schuif het witte brugje naar rechts zodat deze aan de linkerzijde los komt
2. neem dit brugje uit en vervang de knoopcelbatterij (de + naar boven)
3. plaats het brugje terug rechts in de opening, duw het naar beneden en schuif dit naar links zodat dit brugje de batterij weer vastklemt
4. druk nu 1x op toets **RESET** en stel de klok en de alarmtijden opnieuw in

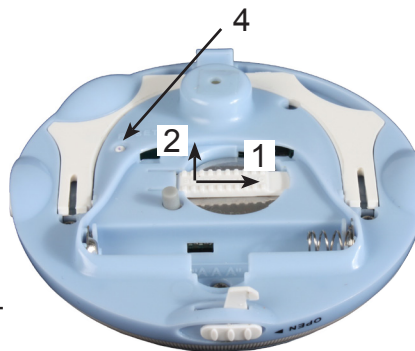

Uitgewerkte batterijen niet bij het huisvuil deponeren maar inleveren als klein chemisch afval.

Instellen:

klok:

1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar  naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de uren-weergave gaat knipperen
3. draai de witte gekartelde ring rond om de uren in te schakelen
4. druk kort op knopje , de minuten-weergave gaat knipperen

5. draai de witte gekartelde ring rond om de minuten in te schakelen
6. druk kort op knopje  om de tijd vast te leggen

alarm-tijden:

1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar  naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de alarmtijd bij **1** gaat knipperen
3. draai de witte gekartelde ring rond om de alarmtijd voor de eerste medicatie van de dag in te stellen; de alarmtijd kunt u per half uur instellen
4. druk kort op knopje , de alarmtijd bij **2** gaat knipperen
5. herhaal instructie 3 en 4 voor achtereenvolgens de alarmtijden **2**, **3**, **4** en **5** (*)
6. druk kort op knopje  om de alarmtijden vast te leggen

**: Heeft u aan minder dan 5 alarmtijden genoeg draai de ring dan zolang rond totdat het display -:- weergeeft, deze alarmtijd is nu uitgeschakeld*

wijzigen alarm-tijden:

1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar  naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de alarmtijd bij **1** gaat knipperen
3. druk het knopje  herhaaldelijk in totdat de te wijzigen alarmtijd knippert
4. draai de witte gekartelde ring rond om de nieuwe alarmtijd in te stellen (*)
5. druk herhaaldelijk kort op knopje  om de nieuwe alarmtijd(en) vast te leggen

**: Wilt u een alarmtijd volledig wissen, draai de ring dan zolang rond totdat het display -:- weergeeft, deze alarmtijd is nu uitgeschakeld*

alarm-sigitaal:

Gebruik de schuifschakelaar    om het gewenste alarmsignaal in te stellen. Deze instelling wordt tevens op het display weergegeven:

- : bij alarm klinkt gedurende maximaal 30 seconden alleen een schelle beeptoon
- : bij alarm gaat het pillendoosje gedurende maximaal 30 seconden alleen trillen
- : bij alarm klinkt gedurende maximaal 30 seconden afwisselend een beeptoon en gaat het pillendoosje trillen

Medicijnen in pillendoos opbergen:

1. draai de doorzichtige pillendeksel rond totdat het vakje 1 vrij komt
2. vul dit vakje met de medicijnen die u als eerste moet innemen, overeenkomend met de alarmtijd die u bij **1** heeft ingesteld
3. verdraai de pillendeksel zodat vakje 2 vrij komt en doe hier de medicijnen in die u bij alarmtijd **2** moet innemen
4. herhaal dit, indien van toepassing, voor de vakjes 3, 4 en 5.
5. draai tot slot de pillendeksel naar de beginpositie (alle 5 de vakjes gesloten)

Werking:

Zodra de alarmtijd is aangebroken, gaat het pillendoosje gedurende maximaal 30 seconden beepen, trillen of afwisselend beepen en trillen en licht het symbool  op in het display.

als u het alarm niet opmerkt dan wordt het alarm-sigitaal tot 2x toe na 5 minuten herhaald, daarna blijft de dubbele punt in de alarmtijd knipperen als indicatie dat u dit alarm niet heeft 'gezien'

als u tijdens het alarm op toets  of  drukt dan stopt het alarmsignaal maar zal na 5 minuten opnieuw klinken

als u de deksel verdraait om een nieuw pillenvakje te openen dan stopt het alarmsignaal en wijzigt de alarmtijd in --:--

ook als u 15 minuten vóór de ingestelde alarmtijd de pillendeksel verdraaid, verdwijnt de alarmtijd en wordt --:-- weergegeven; de ACP-80 gaat er hierbij vanuit dat u alvast de medicatie heeft genomen en dit alarm gaat vandaag niet meer af

automatische reset: elke ochtend om 0:13 reset het pil-alarm zichzelf en worden de geprogrammeerde tijden weer weergegeven, klaar voor een nieuwe dag

Meten van de hartslag:

1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar  naar links te schuiven
2. druk kort op toets , het symbool  licht in het display op
3. plaats de top van uw wijsvinger op de sensor (de sensor geheel bedekken), het symbool  gaat knipperen
4. na 15 tot 60 seconden klinkt een beeptoon en wordt uw hartslag in het display weergegeven

Na enkele seconden keert het display terug naar de tijd-weergave.



Toetsblokkering:

Schuif aan de zijkant van het pillendoosje de schuifschakelaar  in de richting van de pijl om de toetsen te blokkeren zodat u de instellingen niet per abuis kunt wijzigen.

Displayverlichting:

1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar  naar links te schuiven
2. druk kort op toets  om de displayverlichting voor 10 seconden in te schakelen.

Tafelstandaard:

Het klok/alarmdeel van de ACP-80 kunt u losnemen van het pillendeel en met behulp van de standaard als los klokje gebruiken.



Handmatige reset:

Bij een vermeende storing van de ACP-80 kan het nodig zijn om de elektronica te resetten.

1. gebruik de schuifschakelaar  om de ACP-80 te openen
2. druk met een puntig voorwerp het knopje **RESET** kort in
3. na enkele seconden is de ACP-80 gereset



Let op: zowel de klok als alle alarmtijden zijn nu gewist en moeten opnieuw geprogrammeerd worden.

Service:

- Als het alarmsignaal niet of zwak klinkt en de displayverlichting functioneert niet of nauwelijks, vervang dan de 1,5V AAA batterij.
- Wordt de display-uitlezing van de klok en de geprogrammeerde tijden zwak, vervang dan de knoopcelbatterij.
- Gebruik bij een vermeende storing eerst de **RESET** toets om de elektronica te resetten.
- Let op dat het niet functioneren van een toets ook kan worden veroorzaakt doordat de  schakelaar naar rechts is geschoven.
- Is de storing ondanks deze tips nog niet verholpen, raadpleeg dan de Alecto servicedienst op telefoonnummer 073-6411355.

Verklaring van conformiteit:

De Alecto ACP-80 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.NL

